

Omnicolori

Prophylaxe Instrumente

Anwendungs-Übersicht



GRACEY

Fig 5-6 Für alle Wurzelflächen an den Prämolaren und Frontzähnen.
OK + UK - leichte Abwinkelung




Fig 7-8 Für bukkale, linguale sowie palatinale Flächen der Prämolaren und Molaren OK + UK - mittlere Abwinkelung



Fig 11-12 Für mesiale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren
OK + UK - mittlere Abwinkelung



Fig 13-14 Für distale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren
OK + UK

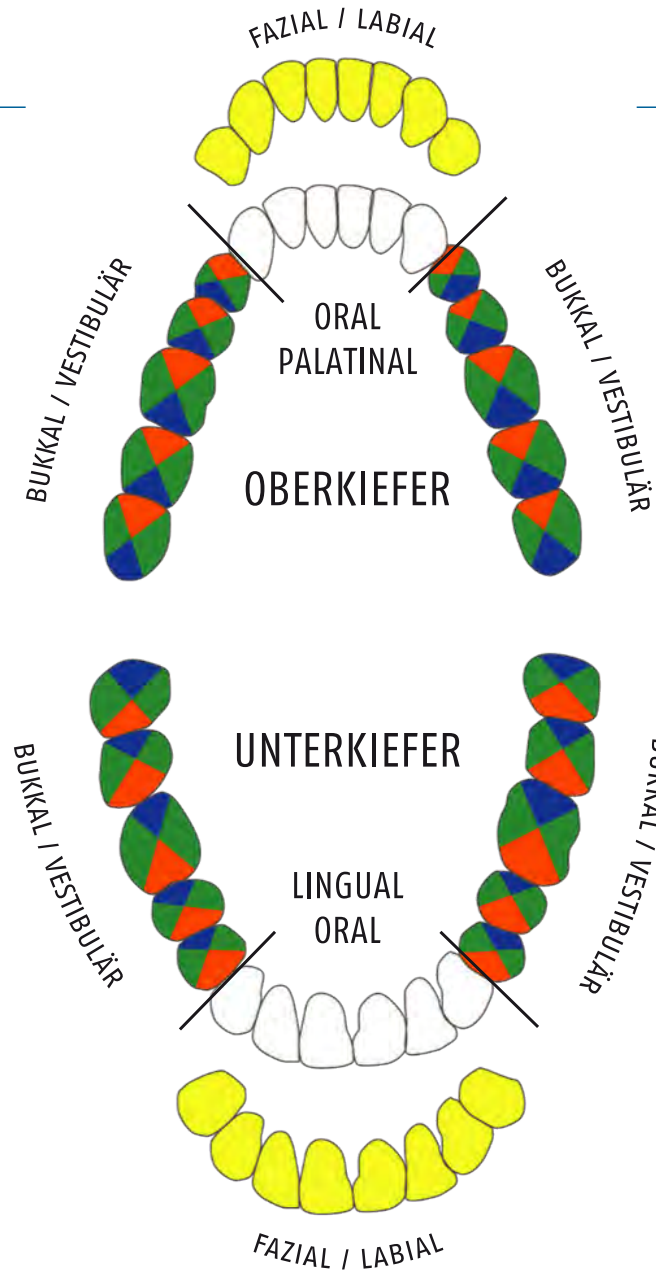

UNIVERSAL

Scaler für Front- und Seitenzahnbereich -
leicht abgewinkelte Arbeitsenden.

Fig H6-H7



Universalscaler

Fig M23



Universalkürette

Fig M23A



Fig M23

Fig M23A

